

# Molusinkid®

Gel Cutáneo

**Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Consérvelas junto al tubo hasta la finalización de la vida útil del producto.**

## 1. Qué es Molusinkid® y para qué se utiliza

Molusinkid® es un producto sanitario indicado para el tratamiento cutáneo local de las lesiones por *Molluscum contagiosum*.

El *Molluscum contagiosum* es una infección producida por un virus de la familia de los Poxvirus que puede infectar la piel causando lesiones en forma de pápulas o nódulos (moluscos = *Molluscum*) elevados con apariencia de perla. Se trata de una infección benigna, pero muy contagiosa, que afecta generalmente a niños, aunque puede también afectar a jóvenes y adultos.

Molusinkid® contiene hidróxido potásico al 10 %, que presenta un valor de pH muy alcalino, lo que le proporciona un efecto cauterizante sobre la lesión, eliminando el *Molluscum*.

Otros componentes de la formulación son: un derivado del butilciclohexanol, pentilenglicol, acetato de glicerina mentona, carbómero, alcohol isopropílico y agua purificada. El producto incluye un aplicador que usa una tecnología de válvula de silicona para asegurar la dispensación controlada en el nódulo del *Molluscum* y evitar la aplicación en la piel sana circundante al mismo.

## 2. Cómo usar Molusinkid®

**ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO ES CORROSIVO, POR ELLO ES IMPORTANTE APLICAR EL GEL ÚNICAMENTE SOBRE EL NÓDULO DE MOLLUSCUM A TRATAR. NO APLICAR SOBRE LA PIEL SANA NI CERCA DE LOS OJOS.**


Aplicar una vez al día sobre cada nódulo (*Molluscum*) según descrito en la sección "Modo de empleo".

Repetir la aplicación diaria hasta observar enrojecimiento e inflamación del nódulo, lo que indica que el *Molluscum contagiosum* va a desaparecer. Entonces, detener la aplicación de Molusinkid® sobre el nódulo. Gran parte de los nódulos así tratados se secarán y desaparecerán completamente en unas 2-5 semanas. Si no observa ningún efecto en los nódulos después de 10 días de tratamiento, consulte con su médico.

### Modo de empleo:

#### 1. ANTES DE LA PRIMERA APLICACIÓN:

Quitar el tapón del envase. Purgar el aplicador. Este paso debe realizarse sobre un papel absorbente o gasa, no directamente sobre la piel, ya que debido a la viscosidad del producto puede ofrecer una ligera resistencia y existe riesgo de salpicaduras durante el purgado.

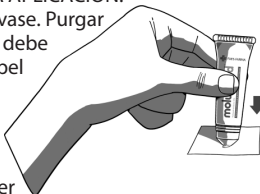


Para purgar el aplicador, apretar **fuertemente** la punta de silicona sobre el papel o gasa a la vez que se aprieta **ligeramente** el tubo de plástico y levantar. Repetir la operación hasta que salga por primera vez el producto por la punta de silicona. De esta manera, quedará cargada la punta del lápiz aplicador y preparada para aplicar el gel sobre las lesiones de la piel.

#### 2. APLICACIÓN:

Aplicar el producto solamente sobre el nódulo, procurando no depositarlo sobre la piel sana circundante.

No apretar la punta de silicona fuertemente sobre la piel, solo apretar ligeramente el tubo.

Si se aprecia que el tubo ofrece resistencia, repetir la operación de purgado de la punta sobre un papel o gasa. Tenga cuidado de no apretar el tubo demasiado fuerte o directamente hacia arriba, ya que el producto podría salpicar y dañar los ojos y la piel.

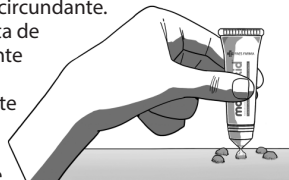

#### 3. SECADO:

Esperar 1-2 minutos a que el producto seque. No tocar la piel tratada mientras dure el secado.



#### 4. ACLARADO:

Después del secado, aclarar la zona (nódulos y zona circundante) con una gasa empapada en agua a fin de retirar los restos de producto.



#### 5. LIMPIEZA:

Después de cada uso, se debe limpiar la punta del lápiz aplicador con una gasa húmeda para eliminar los restos de producto que haya quedado adherido. Vuelva a colocar el tapón inmediatamente después de cada uso para evitar la obstrucción de la punta del lápiz aplicador.



#### 6. LAVADO DE MANOS

Lávese las manos inmediatamente después de cada uso con el fin de no extender la infección y de evitar que queden restos de gel en sus manos que pueda entrar en contacto con piel sana, ojos o ropa.

### Advertencias:

- La aplicación del producto deberá realizarla exclusivamente un adulto, evitando la manipulación del mismo por los niños.
- Mantener siempre el tubo hacia abajo mientras lo presiona para evitar daño en los ojos si el producto salpicara.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Llamar al Servicio Nacional de Toxicología (91 562 04 20).

### Efectos secundarios conocidos y precauciones:

- Inmediatamente después de la aplicación del gel, puede experimentar picor, dolor, irritación temporal, eritema o sensación de quemazón.
- Después de que haya desaparecido el nódulo (*Molluscum*), puede haber una decoloración de la piel, que desaparecerá por sí sola.
- Apriete suavemente el tubo para evitar derrames.
- No aplique el gel sobre los nódulos una vez aparezca enrojecimiento e inflamación. En caso de proseguir con el tratamiento donde ya ha aparecido inflamación o irritación, podría llegar a producirse una ulceración en la zona tratada.
- Si no ve ningún cambio en los nódulos después de 10 días de tratamiento, consulte con su médico.
- Si olvida un día la aplicación, no lo aplique 2 veces al día siguiente.
- Evite que los niños se toquen las partes tratadas mientras se produce el secado.
- Lávese las manos después de cada aplicación.
- No se frote los ojos o mucosas si tiene producto en los dedos.
- Evite el contacto con los ojos. En caso de entrar en contacto con los ojos, aclare con abundante agua y consulte con su médico.
- En caso de que el producto entre en contacto con piel sana o membrana mucosa, aclare inmediatamente con agua abundante.
- Informe a su médico si está aplicando otro tratamiento.
- Evite el contacto del producto con la ropa o cualquier otro material delicado, ya que el producto es corrosivo.

### Cuándo no utilizar Molusinkid®:

- Para el tratamiento de otras lesiones de la piel que no sean *Molluscum*.
- En niños menores de 2 años.
- Sobre zonas de piel fina o sensible como contorno de ojos y boca, o sobre membranas mucosas. No es recomendable su uso en la cara. Tenga especial precaución en evitar el contacto del producto con los ojos.
- En caso de nódulo (*Molluscum*) infectado.
- Sobre pieles irritadas o infectadas, enrojecidas o con signos de inflamación.
- En pieles con eczema atópico en fase aguda.
- Durante la lactancia, se recomienda no utilizar el gel en zonas del cuerpo que puedan entrar en contacto con el lactante.

### Recomendaciones y buenas prácticas para evitar la diseminación del *Molluscum*:

El *Molluscum contagiosum* es una infección cutánea contagiosa; por ello, para evitar su propagación, se recomienda:

- Evitar tocar la piel sana con un tubo que haya estado en contacto con un nódulo.
- Lavarse bien las manos después de cada aplicación.
- No compartir toallas o esponjas.
- No rascarse las lesiones (nódulos), para evitar sobreinfección.
- No bañarse en piscinas públicas ni practicar deportes de contacto.
- Evitar mantener relaciones sexuales.

### Almacenamiento y eliminación:

- No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase y la caja.
- Mantener el tubo bien cerrado, con el tapón, después de cada uso.
- Desechar cualquier resto de producto después de 3 meses de la primera apertura del tubo.
- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

### Presentación:

Tubo de plástico con aplicador que contiene 7,5 g de gel.



Bioglan AB, Borrkatan 31, 211 24 Malmö, Suecia.

Distribuido en España por FAES FARMA, S.A.:  
Máximo Aguirre, 14; 48940 Leioa (Bizkaia), España.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y/o distribuidor y a la autoridad competente.

No tire el producto por el desagüe ni a la basura; dejar en el punto de reciclaje en la farmacia.



Producto sanitario.



Primera publicación: junio de 2020.  
Última actualización: junio de 2020.